

DATENBLATT

Code


Beschreibung

**AC 150 B
AC 150 R
AC 150 V**

Schlauchstelle Kunststoffklemme – blau rot grün



Gestalt

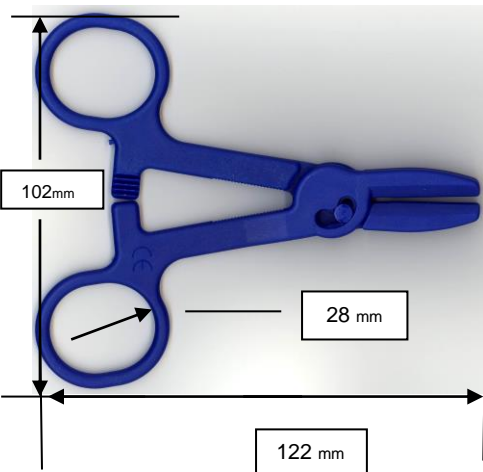

Nicht steriles medizinisches Gerät der Klasse I zertifiziert nach EU-Verordnung 2017/745 (MDR) gemäß Anhang II+III.

Hergestellt aus 30% glasfaserverstärktem Nylon, zum teilweisen oder vollständigen Verschließen von Kunststoff-/Silikonschläuchen mit einer Härte zwischen 60 und 88 ShA, 4 Schließpositionen.

Latex Frei

Enthält keine Phthalate

Qualitätskontrolle: Sichtkontrolle

Sterilisierbar mit: Ethylenoxid; Gamma (bis 25kGy); Dampf (Zyklus bei 125° für 20 Minuten)

Standardverpackung: 800 Stück, nicht steril, im Doppelbehälter aus Polyethylen und Karton.

Aufbewahrung: Medizinprodukte an einem trockenen und sauberen Ort, fernab von einer direkten Wärmequelle aufbewahren.

Lagertemperatur: 0 ° C / 40 ° C (32 ° F / 104 ° F)

Produktlebensdauer: 7 Jahre

Achtung: Die Exposition dieses Produkts gegenüber Materialien, Chemikalien, Sterilisationsverfahren oder Lagertemperaturen außerhalb der Spezifikationen kann zu Materialveränderungen im Produkt führen.

Bei abweichender Verwendung ist der Käufer für die Auswahl, Eignung und Verwendung dieses Produktes allein verantwortlich.

Registrierung: Code AC 150-CND V9099-GMDN 40589-N° Veröffentlichung RDM 2206064