




FICHA TÉCNICA

Código	Descrição	
AC 165 V AC 165 B AC 165 CO	Pinça para fístulas - verde ou azul	CE

Imagem

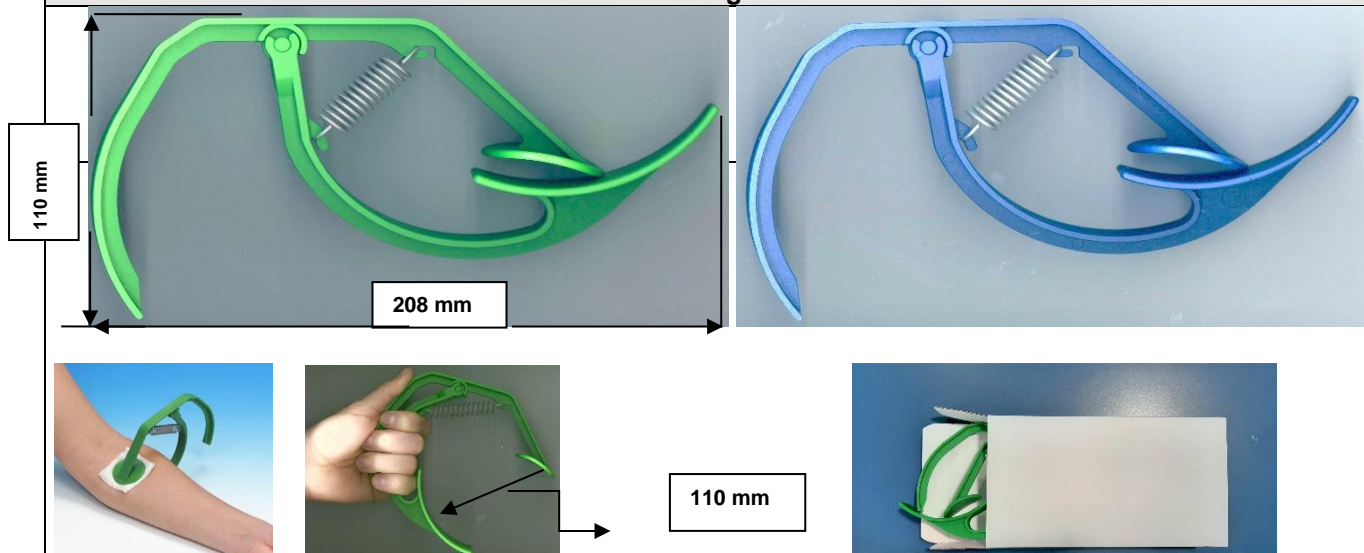

Dispositivo médico não estéril de Classe I certificado em conformidade com o Regulamento da UE 2017/745 sobre os Dispositivos Médicos (MDR), de acordo com o Anexo II+III.

Fabricada em Nylon reforçado com 30% de fibra de vidro, mola em aço inoxidável Aisi 320 de acordo com norma DIN 17224-1; carga de 4,9 kg na abertura máxima.

Para ser utilizada como auxiliar nos procedimentos de medicação (injeções, amostra de sangue, hemodiálise, etc.).

Abertura máxima da pinça: 110 mm

Sem látex

Não contém ftalatos

Controlo de qualidade: visual

Esterilizável por: Óxido de etileno; Gama (até 25kGy); Vapor (ciclo a 125 °C durante 20 minutos)

Embalagem standard: 100 peças avulsas, não esterilizadas, em saco duplo de polietileno e caixa de cartão ou

caixa de 25 embalagens neutras com 2 unidades.

Conservação: Guardar os dispositivos médicos em ambientes secos e limpos, ao abrigo de fontes de calor diretas

Temperatura de armazenamento: 0 °C / 40 °C (32 °F / 104 °F)

Prazo de validade do produto: 7 anos

Advertência: A exposição deste artigo a materiais, produtos químicos, métodos de esterilização ou temperaturas fora das especificações pode causar alterações no material do produto. Se a utilização for diferente, o comprador é o único responsável pela escolha, adequação e utilização deste produto.

Registo: Código AC 165-CND F9080-GMDN 46604-RDM Publicação N.º 2206043