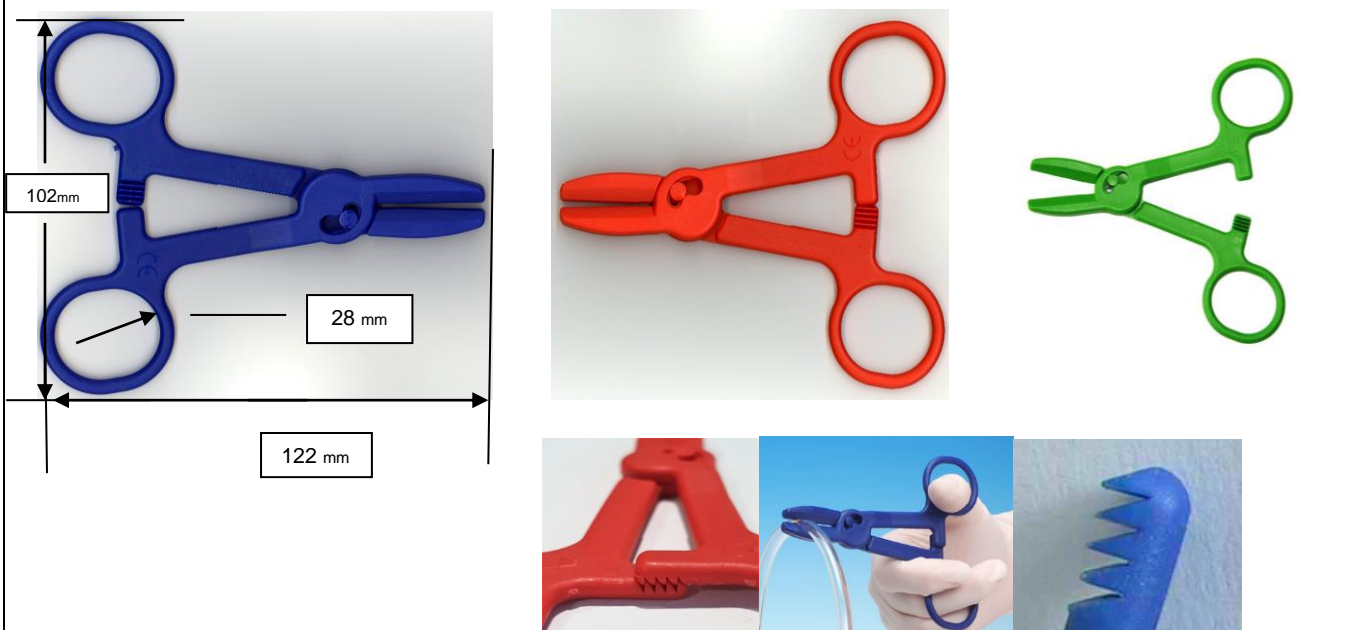



FIȘĂ TEHNICĂ

Cod	Descriere	
AC 150 B AC 150 R AC 150 V	Clemă pentru tub tip foarfecă – albastră roșie verde	CE
Imagine		
		
		

Dispozitiv medical din clasa I nesteril certificat în conformitate cu Regulamentul UE 2017/745 (MDR) conform Anexei II+III.

Fabricat din nailon umplut cu 30% fibră de sticlă, pentru a fi utilizat pentru închiderea parțială sau totală a tuburilor din plastic / silicon cu duritate între 60 și 88 ShA, cu 4 poziții de închidere. Fără latex

Nu conține ftalați

Controlul calității: vizual

Poate fi sterilizat cu: Oxid de etilenă; Gamma (până la 25kGy); Abur (ciclu de 125° timp de 20 de minute)

Ambalaj standard: 800 de bucăți vrac, nesterile, în pungă dublă din polietilenă și carton.

Depozitare: Depozitați dispozitivele medicale în medii uscate și curate, departe de surse de căldură directă.

Temperatura de depozitare: 0°C / 40°C (32°F / 104°F)

Termenul de valabilitate al produsului: 7 ani

Avertisment: Expunerea acestui articol la materiale, substanțe chimice, moduri de sterilizare sau temperaturi în afara specificațiilor poate provoca modificări ale materialului produsului.

Dacă utilizarea este diferită de cea indicată, cumpărătorul este singurul responsabil pentru alegerea, caracterul adecvat și utilizarea acestui produs.

Înregistrare: Cod AC 150-CND V9099-GMDN 40589-Publicație nr. RDM 2206064