
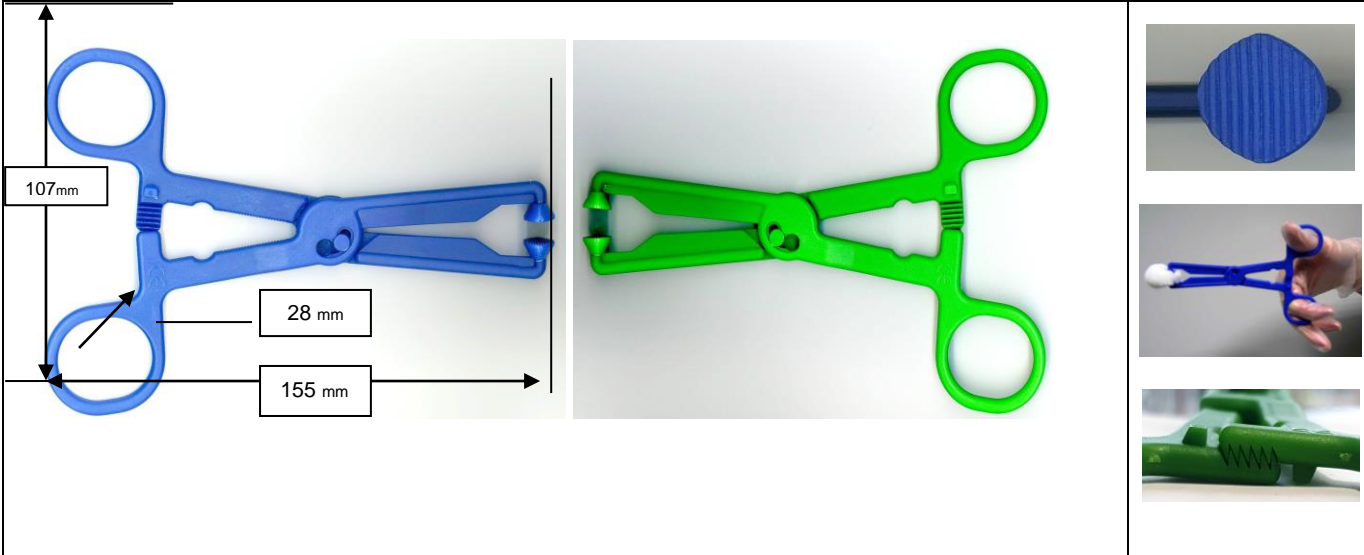



ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

Κωδικός	περιγραφή	
AC 155 B AC 155 V	λαβίδα-ψαλίδι πολλαπλών χρήσεων – μπλε ή πράσινη	
		
εικόνα		
		
		

Μη αποστειρωμένο ιατροτεχνολογικό προϊόν κατηγορίας I πιστοποιημένο δυνάμει του Κανονισμού ΕΕ 2017/745 (MDR) σύμφωνα με το παράρτημα II+III

Κατασκευάζεται από νάιλον ενισχυμένο με 30% υαλοβάμβακα.

Ιατροτεχνολογικό προϊόν που χρησιμοποιείται για το πιάσιμο γαζών και τολυπίων κατά τη διάρκεια διαδικασιών γενικής ιατρικής επίδεσης.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως συγκράτηση σεντονιών.

5 θέσεις κλεισίματος

Χωρίς λατέξ

Δεν περιέχει φθαλικές ενώσεις

Ποιοτικός έλεγχος: οπτικός

Αποστειρώνεται με: Αιθυλενοξειδίο, ακτίνες γάμμα (έως 25kGy)· ατμό (κύκλος 125° για 20 λεπτά)

Τυποποιημένη **συσσκευασία:** 600 τεμάχια χύδην, μη αποστειρωμένα, σε διπλό σάκο πολυαιθυλενίου και χαρτοκιβώτιο.

Φύλαξη: Φυλάξτε τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα σε στεγνό και καθαρό χώρο και μακριά από άμεσες πηγές θερμότητας

Θερμοκρασία αποθήκευσης: 0 ° C / 40 ° C (32 ° F / 104 ° F)

Διάρκεια ζωής του προϊόντος: 7 χρόνια

Προσοχή: Η έκθεση αυτού του προϊόντος σε υλικά, χημικά προϊόντα, τρόπους αποστείρωσης ή θερμοκρασίες εκτός των προδιαγραφών, μπορεί να προκαλέσει αλλαγές στο υλικό του προϊόντος.

Αν χρησιμοποιηθεί για άλλο σκοπό, ο αγοραστής έχει την αποκλειστική ευθύνη για την επιλογή, την καταλληλότητα και τη χρήση αυτού του προϊόντος.

Καταχώριση: Κωδικός AC 155-CND V9099-GMDN 47570-Αρ. δημοσίευσης RDM 427577