


KARTA TECHNICZNA

Kod	Opis	
AC 155 B AC 155 V	Kleszczyki uniwersalne – niebieskie lub zielone	CE

Ilustracja

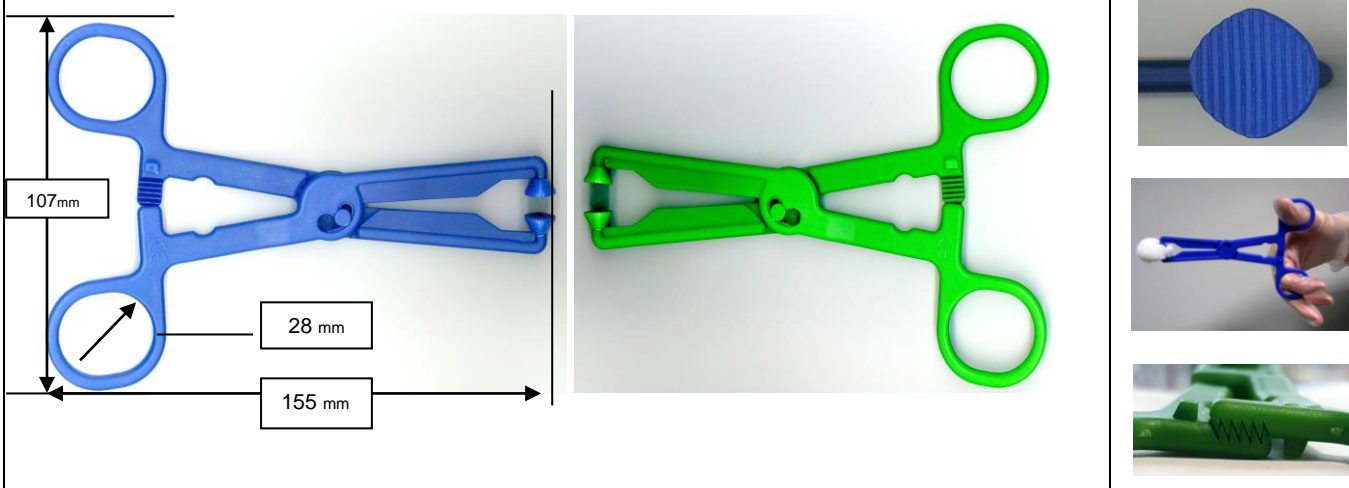

Niesterylny wyrób medyczny klasy I certyfikowany zgodnie z rozporządzeniem UE 2017/745 (MDR) zgodnie z załącznikiem II+III.

Wykonano z nylonu wzmocnionego włóknem szklanym 30%.

Wyrób do chwytania gazy i wacików podczas wykonywania opatrunków w rozumieniu ogólnym.

Może być również używany jako kleszcze mocujące.

5 pozycji zamykania

Nie zawiera lateksu

Nie zawiera ftalanów

Kontrola jakości: wzrokowa

Możliwość sterylizacji: Tlenkiem etylenu; promieniowaniem gamma (do 25 kGy); parą (cykl w 125° przez 20 minut)

Opakowanie standardowe: 600 sztuk luzem, niesterylnych, w podwójnym woreczku polietylenowym i kartonie

Przechowywanie: Wyroby medyczne należy przechowywać w suchym i czystym miejscu, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła

Temperatura przechowywania: 0°C / 40°C (32°F / 104°F)

Okres trwałości produktu: 7 lat

Uwaga: Narażenie tego produktu na działanie materiałów, chemikaliów, metod sterylizacji lub temperatur wykraczających poza specyfikację może spowodować zmiany w materiale wyrobu. W przypadku innego zastosowania nabywca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór, przydatność i zastosowanie tego wyrobu.

Rejestracja: Kod AC 155-CND V9099-GMDN 47570-Publikacja nr RDM 427577